


**Healthometer®**

For information on service or warranty, contact Sunbeam Products, Inc.  
at 1-800-672-5625 or go to [www.healthometer.com](http://www.healthometer.com).

Instalación de las Pila:

1. Localice la cubierta de las pilas en
2. Retire la cubierta e inserte 4 pilas
3. Si aparece "Lo" en la pantalla, ree


**Nota: No utilice pilas recargables.**

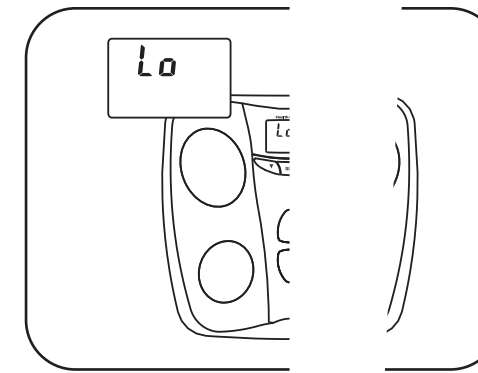

posterior de la balanza.

4 pilas.

Botones e Íconos

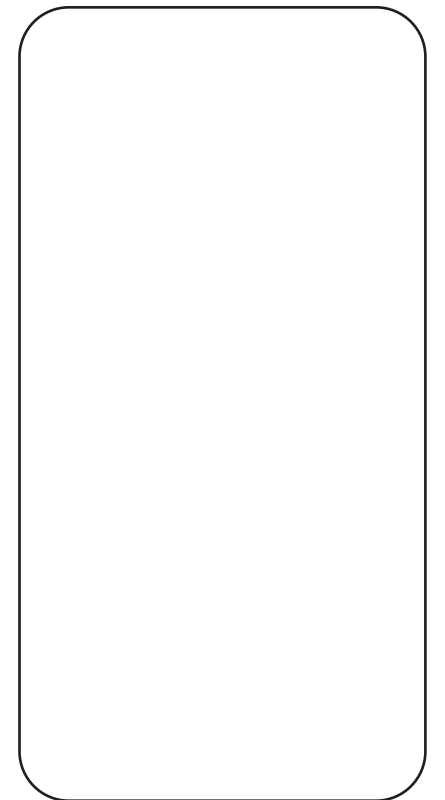

0.0",  
 que indicará que su información ha sido almacenada y la balanza esta lista para ser usada. Repita los pasos 1-6 para programar otro usuario.

**NOTA:** Al estar programando, si no se presiona ningún botón, la pantalla se apagará. Regrese a la pantalla mostrando 0.0", para continuar programando.  
 Si la balanza esta configurada en Kilogramos (KG), la altura estará especificada en centímetros (CM).

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>