

# GUARDIAN®

**Homecare Bed  
4" Extender**

Part #IC-5143

*User  
Instruction  
Manual &  
Warranty*

**Rallonge de 10 cm (4 po)  
pour lit de soins à domicile**

Pièce n° IC-5143

*Manuel de  
l'utilisateur  
et garantie*

**Extensión de Cama para  
Cuidados en el Hogar de  
10.2 cm (4 pulg.)**

No. de Parte IC-5143

*Manual de  
Instrucciones y  
Garantía para  
el Usuario*



## IMPORTANT WARNINGS

### ⚠ WARNING

Inspect all parts for damage to the carton or its contents. If damage is evident, do not use. Contact your local Sunrise Medical dealer immediately.

### ⚠ WARNING

Read all instructions before using this product. Failure to follow these instructions may result in injury or damage.

### ⚠ WARNING

Make sure all attaching hardware is tightened securely at all times.

### ⚠ WARNING

The 4-inch bed extender does not increase the weight capacity of your bed. Refer to your bed user's manual for weight capacity information.

### BED DISASSEMBLY

1. Disconnect hi/lo connecting rod from the bed.
2. Disconnect head spring drive tube by removing the hitch pin, grommet and washer from the clevis pin.
3. Raise the head end and unhook the links between the head and foot sections of the mattress surface.
4. Remove the head and foot boards.
5. Laying the bed on its side, place the head section at a right angle (90 degrees) to the foot section.
6. Disengage head and foot sections.



Figure 1

### INSTALLATION

#### Tools Required

- two 1/2" open-end wrenches
- one vise grip

1. Attach the 4-inch extension pieces to both sides of the foot spring center angle with the bolt and bi-way locknut and tighten securely (Figure 1).

2. Reconnect the foot and head sections as shown in Figure 2.
3. Connect the six hooks to the foot spring fabric with the open end of the hooks facing the floor.
4. Attach one helical spring to one end of the link fabric extension (Figure 3). Attach the other end of the helical spring to one of the two mounting holes in the 4-inch extender.
5. Connect the hooks to the link fabric extension.
6. Attach another helical spring to the other end of the link fabric extension
7. Fasten the helical spring into the mounting hole on the 4-inch extender using vice grips (Figure 4).
8. Repeat for the other link fabric extension.
9. Raise the head end of the bed and connect the hooks to the head spring fabric with the open end of the hooks facing the floor (Figure 5).
10. Reattach head and foot boards to the bed assembly.
11. Install the extended connecting rod included in your kit.
12. Remove the bed's existing head spring drive tube and replace it with the drive tube included in your kit. Reconnect the drive tube to the lift arm of the head spring by inserting the clevis pin and connecting the grommet, washer and hitch pin.



Figure 2

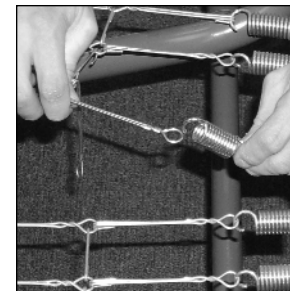


Figure 3

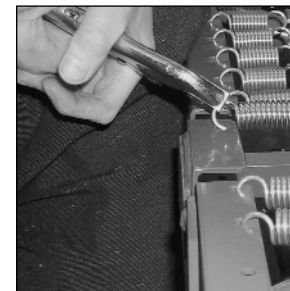


Figure 4

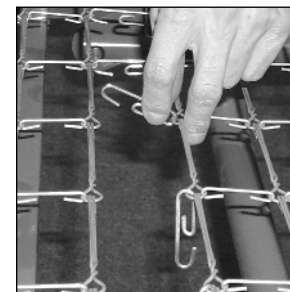


Figure 5

## AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

### ⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que ni l'emballage ni les pièces n'ont été endommagés. Si l'endommagement est évident, n'utilisez pas le dispositif. Contactez immédiatement votre revendeur Sunrise Medical.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Le manquement à l'observation de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou un endommagement du produit.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que tous les dispositifs de fixation sont toujours serrés solidement.

### ⚠ AVERTISSEMENT

La rallonge de lit de 10 cm (4 po.) ne permet pas d'augmenter la capacité de poids du lit. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour toute information concernant la capacité de poids.

## DÉMONTAGE DU LIT

1. Déconnectez du lit la barre de connexion de réglage de la hauteur.
2. Déconnectez le tube d'entraînement de la tête à ressorts en enlevant la cheville d'attache, l'œillet et la rondelle de l'axe à épaulement.
3. Relevez la section tête de lit et décrochez les maillons situés entre les sections tête et pied de la surface du sommier.
4. Enlevez les panneaux de tête et de pied.
5. En posant le lit sur le côté, disposez les sections tête et pied de manière qu'elles forment un angle droit (90°).
6. Dégagez les sections tête et pied.

## INSTALLATION

### Outils requis

- deux clés à fourche de 1,2 cm (1/2 po.)
  - une pince-étau
1. Fixez les pièces de la rallonge de 10 cm (4 po.) sur chaque côté de l'angle central du pied à ressorts, serrez solidement au moyen du boulon et du contre-écrou double (Figure 1).



Figure 1

2. Reconnectez les sections tête et pied comme l'illustre la Figure 2.
3. Connectez les six crochets aux éléments structuraux du pied à ressorts en positionnant le côté ouvert des crochets vers le sol.
4. Attachez un ressort hélicoïdal à l'une des extrémités du maillon d'allongement des éléments structuraux (Figure 3). Attachez l'autre extrémité du ressort hélicoïdal à l'un des deux trous de montage situés sur la rallonge de 10 cm (4 po.).
5. Connectez les crochets aux maillons d'allongement des éléments structuraux.
6. Attachez un autre ressort hélicoïdal à l'autre extrémité du maillon d'allongement des éléments structuraux.
7. Accrochez le ressort hélicoïdal au trou de montage situé sur la rallonge de 10 cm (4 po.) au moyen de la pince-étau (Figure 4).
8. Effectuez la même opération sur l'autre maillon d'allongement des éléments structuraux.
9. Relevez la tête de lit et connectez les crochets aux éléments structuraux de la tête à ressorts en positionnant le côté ouvert des crochets vers le sol (Figure 5).
10. Rattachez les panneaux de tête et de pied à l'ensemble lit.
11. Montez la barre de connexion d'allongement fournie dans votre trousse de montage.
12. Enlevez le tube d'entraînement de la tête à ressorts et remplacez-le par le tube d'entraînement fourni dans votre trousse de montage. Reconnectez le tube d'entraînement au bras élévateur de la tête à ressorts en insérant l'axe à épaulement et en connectant l'œillet, la rondelle et la cheville d'attache..

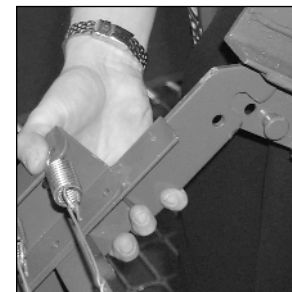


Figure 2

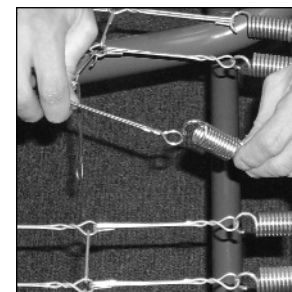


Figure 3

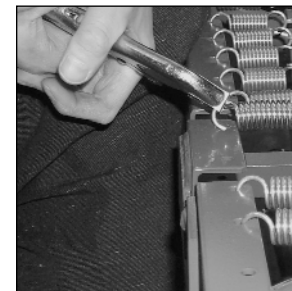


Figure 4

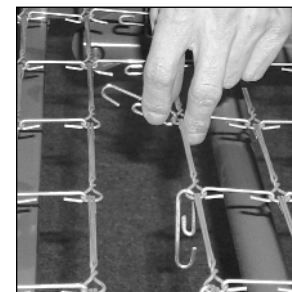


Figure 5

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

### ⚠ ADVERTENCIA

Busque daño en la caja o su contenido. Si el daño es evidente, no la use. Comuníquese con su proveedor de Sunrise Medical de inmediato.

### ⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. No seguir todas estas instrucciones puede provocar lesiones o daños.

### ⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese que los accesorios estén bien fijos en todo momento.

### ⚠ ADVERTENCIA

La extensión de cama de 10.2 cm (4 pulg.) no aumenta la capacidad de peso de su cama. Vea la información de capacidad de peso en el manual del usuario de su cama.

### DESARMADO DE LA CAMA

1. Desconecte la varilla conectora alto / bajo de la cama.
2. Desconecte el tubo motor de la malla de la cabeza al quitar el pasador de seguridad, anillo y arandela del pasador de horquilla.
3. Levante la cabecera y desenganche los tirantes entre la cabecera y los pies de la superficie del colchón.
4. Quite la tabla de la cabecera y de los pies.
5. Coloque la cama de lado, el extremo de la cabeza en ángulo recto (90 grados) en relación al extremo de los pies.
6. Desconecte las secciones de la cabeza y los pies.

### INSTALACIÓN

#### Herramientas Necesarias

- dos llaves abiertas de 1/2 pulg.
- una mordaza

1. Fije las piezas de la extensión de 10.2 cm (4 pulg.) a ambos lados del ángulo central de la malla de los pies con el perno y contratuerca y apriete bien (Figura 1.)



Figura 1

2. Reconecte las secciones de la cabeza y pies como se muestra en la Figura 2.
3. Conecte los seis ganchos a la tela de la malla de los pies con el extremo abierto de los ganchos mirando hacia el piso.
4. Fije el muelle helicoidal a un extremo de la extensión de tela (Figura 3.) Fije el otro extremo del muelle helicoidal a uno de los dos orificios de montaje en la extensión de 10.2 cm (4 pulg.)
5. Conecte los ganchos a la extensión de tela.
6. Fije el otro muelle helicoidal al otro extremo de la extensión de tela.
7. Fije el muelle helicoidal en el orificio de montaje en la extensión de 10.2 cm (4 pulg.) usando las mordazas (Figura 4.)
8. Repita el procedimiento para la otra extensión de tela.
9. Eleve la cabecera de la cama y conecte los ganchos a la tela de la malla de la cabeza con el extremo abierto de los ganchos mirando hacia el piso (Figura 5.)
10. Fije nuevamente las tablas de la cabeza y pies a la cama.
11. Instale la varilla conectora extendida incluida en su kit.
12. Quite el tubo motor de la malla de la cabeza existente en su cama y reemplácelo con el tubo motor incluido en su kit. Reconecte el tubo motor al brazo de levantamiento de la malla de la cabeza al insertar el pasador de horquilla y conectar el anillo, arandela y pasador de seguridad.



Figura 2

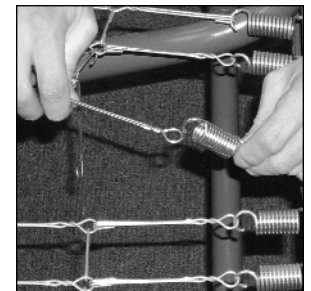


Figura 3

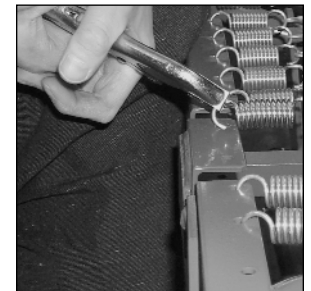


Figura 4

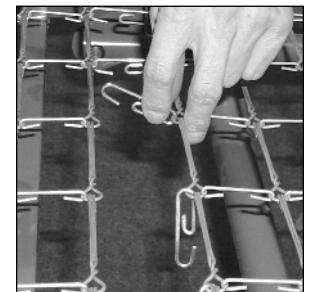


Figura 5



---

Manufactured for:  
Fabriqué pour:  
Fabricado para:

**Sunrise Medical Inc.**  
7477 East Dry Creek Parkway  
Longmont, Colorado 80503  
USA  
(800) 333-4000  
In Canada (800) 263-3390

Made in Taiwan  
Fabriqué en Taiwan  
Hecho en Taiwán

© 2002, Sunrise Medical 11.02  
IM-429001 Rev B

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>