

GUARDIAN[®]

Component Mobility System *User Instructions*

Model IC-5140

IMPORTANT WARNINGS

⚠ WARNING

Inspect all parts for damage to the carton or its contents. If damage is evident, do not use. Contact your local Sunrise Medical dealer immediately.

⚠ WARNING

Read all instructions before using this product. Failure to follow these instructions may result in injury or damage.

⚠ WARNING

Make sure all attaching hardware is tightened securely at all times.

⚠ WARNING

The recommended weight capacity of the component mobility system is 100 lbs.

INSTALLATION

1. Remove head and foot boards from bed. For complete instructions, refer to Bed Instruction Manual (IM-429000).
2. Connect wheels to 1/2" tubing on both ends of connector, making sure that the side of the wheel with six ribs faces the inside axle assembly and the side with three ribs faces the outside (Figure 1).

NOTE– To help the wheels fit onto the tubing more easily, tap the wheel with a rubber or plastic mallet.

3. Fasten both wheels into place with hitch pin.
4. Position mobility system over the bed end hook (Figure 2).
5. Push down so that the pins of the bed end hook depress the spring button. Slide the mobility system to the left to fasten it to the head or foot spring.
6. Turn the head or foot spring around and place the wheels on the floor.
7. To remove, depress the spring button with finger, slide the mobility system to the right and remove from bed end hook.

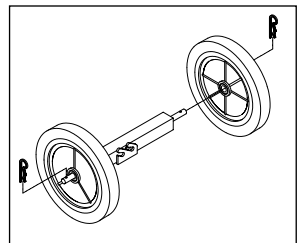


Figure 1

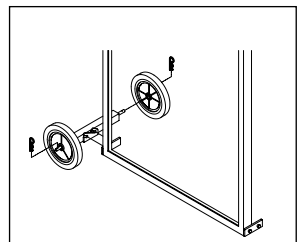


Figure 2

GUARDIAN®

Dispositif mobile *Instructions d'utilisation*

Modèle IC-5140

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que ni l'emballage ni les pièces n'ont été endommagés. Si l'endommagement est évident, n'utilisez pas le dispositif. Contactez immédiatement votre revendeur Sunrise Medical.

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Le manquement à l'observation de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou un endommagement du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que tous les dispositifs de fixation sont toujours serrés solidement.

⚠ AVERTISSEMENT

Il est recommandé de ne pas dépasser une charge de 45,3 kilos (100 lbs) sur le système mobile.

INSTALLATION

1. Enlevez les panneaux de pied et de tête du lit. Reportez-vous pour des instructions complètes au Manuel d'utilisation du lit (IM 429000)
2. Connectez les roues au tube de 1,2 cm (1/2 po.) de chaque côté du raccord, en veillant à ce que le côté de la roue munie des six nervures soit tourné vers l'intérieur de l'ensemble essieu et que le côté muni de trois nervures soit tourné vers l'extérieur de l'ensemble essieu (Figure 1)

REMARQUE- Pour faciliter l'insertion de la roue dans le tube, tapez sur la roue avec un maillet en caoutchouc ou en plastique.

3. Attachez chaque roue au moyen de la cheville d'attache.
4. Positionnez le dispositif mobile sur le crochet du pied de lit (Figure 2).
5. Appuyez pour que les rivets du crochet du pied de lit déclenchent le bouton à ressort. Glissez le dispositif mobile à gauche pour l'attacher au pied ou à la tête à ressorts.
6. Retournez le pied ou la tête à ressorts et posez les roues sur le sol.
7. Pour enlever le dispositif, appuyez sur le bouton à ressort, glissez le dispositif mobile à droite et décrochez le dispositif du pied de lit.

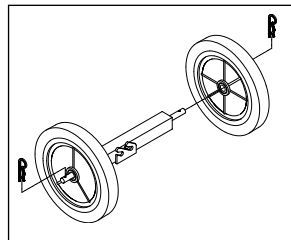


Figure 1

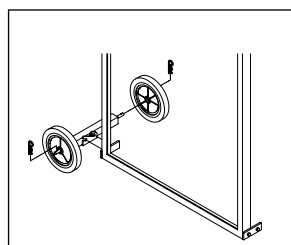


Figure 2

GUARDIAN®

Sistema de Movilidad *Instrucciones para el usuario*

Modelo IC-5140

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA

Busque daño en la caja o su contenido. Si el daño es evidente, no lo use. Comuníquese con su proveedor de Sunrise Medical de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. No seguir todas estas instrucciones puede provocar lesiones o daños.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese que los accesorios estén bien fijos en todo momento.

⚠ ADVERTENCIA

La capacidad de peso recomendada del sistema de movilidad es de 45.4 Kg (100 libras.)

INSTALACIÓN

1. Desconecte las tablas de la cabeza y pies de la cama. Para ver las instrucciones completas, vea el Manual de Instrucciones de la Cama (IM-429000.)
2. Conecte las ruedas a los tubos de 1/2 pulg. en ambos extremos del conector, asegurándose que el lado de la rueda con las seis costillas mire hacia el eje interior y el lado con tres costillas mire hacia fuera (Figura 1.)

NOTA- Para ayudar a que las ruedas entren más fácilmente en el tubo, golpee la rueda con un mazo de goma o plástico.

3. Fije ambas ruedas en su sitio con un pasador de seguridad.
4. Coloque el sistema de movilidad sobre el gancho del extremo de la cama (Figura 2.)
5. Empuje hacia abajo para que las clavijas del gancho del extremo de la cama opriman el botón del muelle. Deslice el sistema de movilidad hacia la izquierda para fijarlo a la malla de la cabeza o pies.
6. Voltee la malla de la cabeza o pies y coloque las ruedas en el piso.
7. Para quitarlo, oprima el botón del muelle con un dedo, deslice el sistema de movilidad hacia la derecha y quítelo del gancho del extremo de la cama.

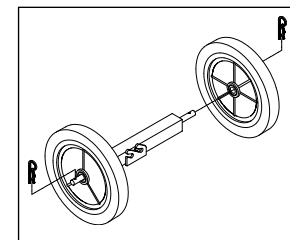


Figura 1

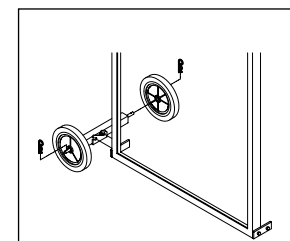


Figura 2



Manufactured for:
Fabriqué pour:
Fabricado para:

Sunrise Medical Inc.
7477 East Dry Creek Parkway
Longmont, Colorado 80503
USA
(800) 333-4000
In Canada (800) 263-3390

Made in Taiwan
Fabriqué en Taiwan
Hecho en Taiwán

© 2002, Sunrise Medical 11.02

IM-429003 Rev B

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>