

# GUARDIAN<sup>®</sup>

## Component Racking Connector *User Instructions*

Model IC-5142

### IMPORTANT WARNINGS

#### **⚠ WARNING**

Inspect all parts for damage to the carton or its contents. If damage is evident, do not use. Contact your local Sunrise Medical dealer immediately.

#### **⚠ WARNING**

Read all instructions before using this product. Failure to follow these instructions may result in injury or damage.

#### **⚠ WARNING**

Make sure all attaching hardware is tightened securely at all times.

#### **⚠ WARNING**

The recommended weight capacity of the component racking connectors is 150 lbs.

### INSTALLATION

1. Disconnect head and foot springs from bed assembly. For complete instructions, refer to Bed Instruction Manual (IM-429000).
2. Connect the head and foot ends by inserting the pins of the rail connectors into the hooks of the bed ends (Figure 1).
3. Use the flat head screws and hex nuts provided to fasten the rail connectors to the head and foot ends. Make sure the hex nuts are placed on the inside of the rail connectors.
4. Place head and foot springs upright across the rail connectors between the bed ends (Figure 2).

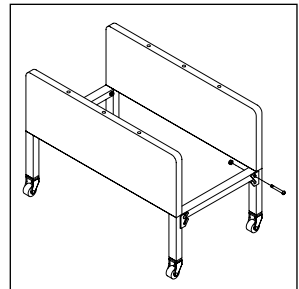


Figure 1

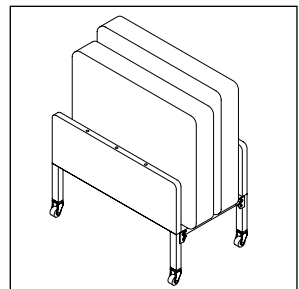


Figure 2

# GUARDIAN®

## Raccord de châssis de lit *Instructions d'utilisation*

Modèle IC-5142

### AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

#### ▲ AVERTISSEMENT

Vérifiez que ni l'emballage ni les pièces n'ont été endommagés. Si l'endommagement est évident, n'utilisez pas le dispositif. Contactez immédiatement votre revendeur Sunrise Medical.

#### ▲ AVERTISSEMENT

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Le manquement à l'observation de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou un endommagement du produit.

#### ▲ AVERTISSEMENT

Vérifiez que tous les dispositifs de fixation sont toujours serrés solidement.

#### ▲ AVERTISSEMENT

Il est recommandé de ne pas dépasser une charge de 68 kilos (150 lbs) sur le raccord de châssis.

### INSTALLATION

1. Déconnectez les ressorts de la tête et du pied de l'ensemble lit. Reportez-vous pour des instructions complètes au Manuel d'utilisation du lit (IM-429000).
2. Connectez les sections tête et pied de lit en insérant les rivets des raccords de côté dans les crochets des panneaux de lit (Figure 1).
3. Pour visser les raccords de côté sur les sections têtes et pied de lit, utilisez les vis à tête plate et les écrous hexagonaux. Veillez à placer les écrous hexagonaux du côté intérieur des raccords de côté.
4. Placez les sections pied et tête à ressorts verticalement sur les raccords de côté entre les panneaux de lit. (Figure 2).

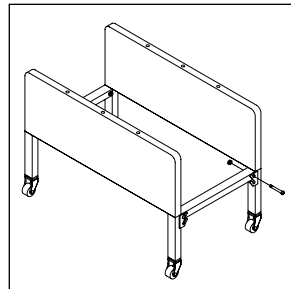


Figure 1

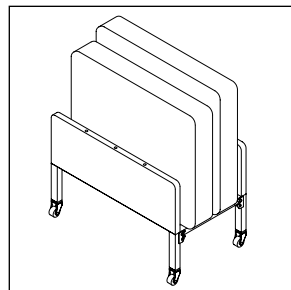


Figure 2

# GUARDIAN®

## Conector para Almacenado *Instrucciones para el usuario*

Modelo IC-5142

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES

#### ▲ ADVERTENCIA

Busque daño en la caja o su contenido. Si el daño es evidente, no lo use. Comuníquese con su proveedor de Sunrise Medical de inmediato.

#### ▲ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. No seguir todas estas instrucciones puede provocar lesiones o daños.

#### ▲ ADVERTENCIA

Asegúrese que los accesorios estén bien fijados en todo momento.

#### ▲ ADVERTENCIA

La capacidad de peso recomendada del conector de almacenamiento es de 68.1 Kg (150 libras.)

### INSTALACIÓN

1. Desconecte las mallas de la cabeza y pies de la cama. Para ver las instrucciones completas, vea el Manual de Instrucciones de la Cama (IM-429000.)
2. Conecte los extremos de la cabeza y de los pies al insertar las clavijas de los conectores del riel en los ganchos de los extremos de la cama (Figura 1.)
3. Use los tornillos de cabeza plana y las tuercas hex provistas para fijar los conectores del riel a los extremos de la cabeza y pies. Asegúrese que estén colocadas las tuercas hex al interior de los conectores del riel.
4. Coloque la malla de la cabeza y pies verticalmente encima de los conectores del riel entre los extremos de la cama (Figura 2.)

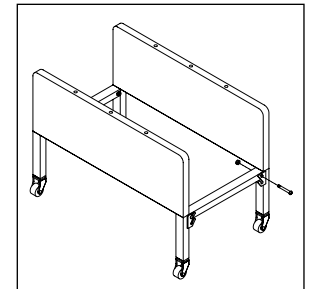


Figura 1

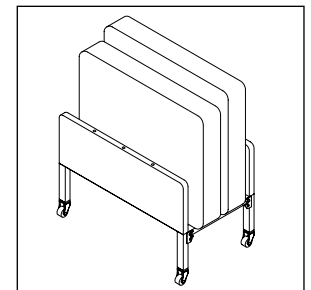


Figura 2



---

Manufactured for:  
Fabriqué pour:  
Fabricado para:

**Sunrise Medical Inc.**  
7477 East Dry Creek Parkway  
Longmont, Colorado 80503  
USA  
(800) 333-4000  
In Canada (800) 263-3390

Made in Taiwan  
Fabriqué en Taiwan  
Hecho en Taiwán

© 2002, Sunrise Medical 11.02

IM-429002 Rev B

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>